




EXAM **V**ISION™

Enestående ytelse

Skreddersydde
lupebriller og LED-lys
i dansk design

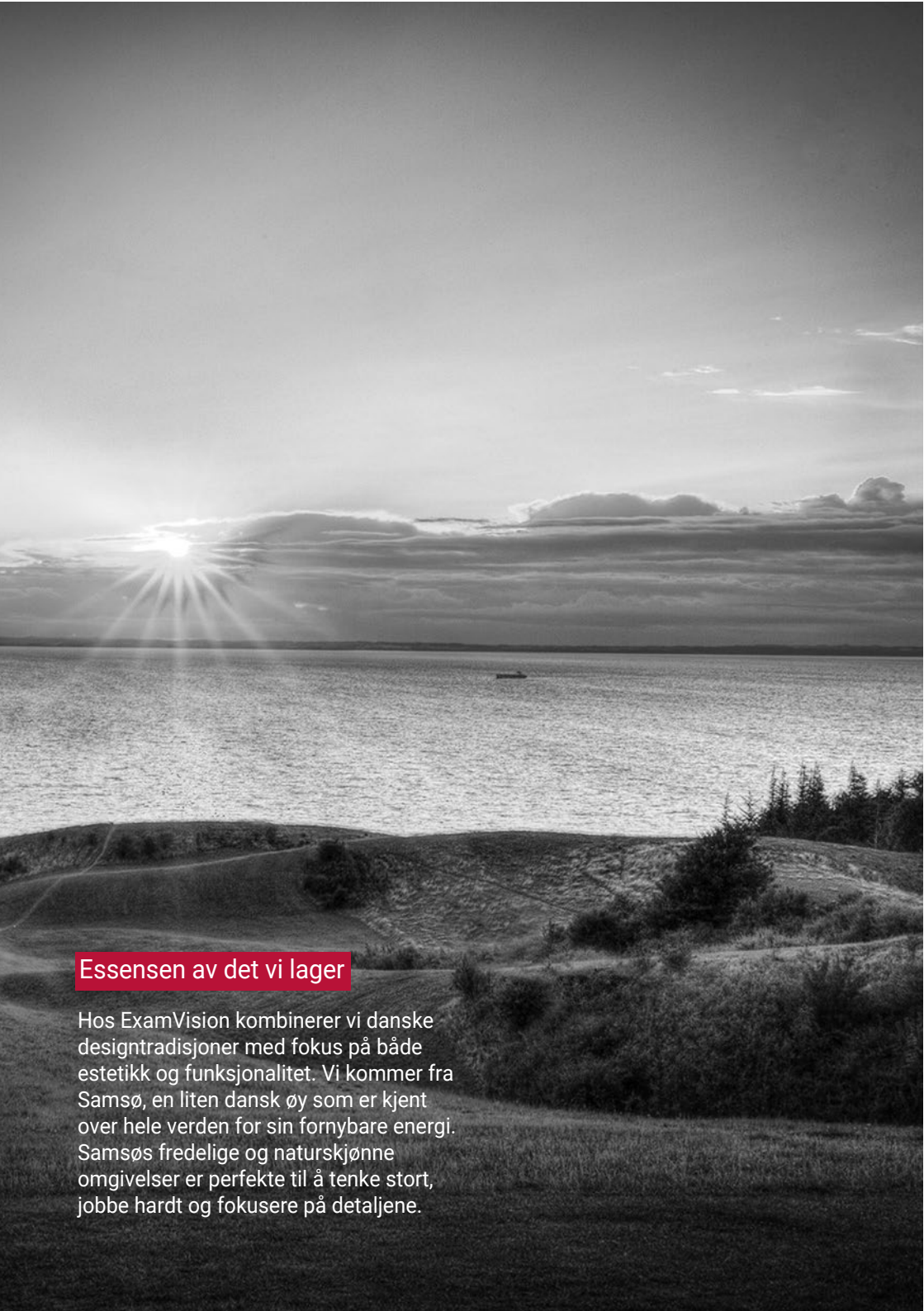

Essensen av det vi lager

Hos ExamVision kombinerer vi danske designtradisjoner med fokus på både estetikk og funksjonalitet. Vi kommer fra Samsø, en liten dansk øy som er kjent over hele verden for sin fornybare energi. Samsøs fredelige og naturskjønne omgivelser er perfekte til å tenke stort, jobbe hardt og fokusere på detaljene.



reddot award
winner

Vi mener at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd

Vårt team av optikere og høyt utdannede spesialister vil arbeide tett med deg for å finne den perfekte lupebrille-løsningen, skreddersydd til akkurat deg. De vil lytte til dine behov og tilby deg en ideell løsning, som sikrer deg en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

Prøv ExamVision lupebriller og få gratis råd og veiledning om syn, optikk, beskyttelse og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dine fordeler

Alle våre produkter er et resultat av en perfekt synergi mellom teknologi og håndverk. Hver enkelt lupebrille produseres og settes sammen etter individuelle mål. Deretter gjennomgår lupebrillen en grundig kvalitetskontroll, før den forlater fabrikken på Samsø.

- **Fremragende syn og presisjon**

Vår optikk hjelper med å optimalisere synet ditt, som er avgjørende for å kunne utføre kvalitets- og presisjonsarbeid.

- **Arbeidsglede**

Oppnås som resultat av mer effektivt arbeid, bedre behandlingsresultater og flere tilfredse pasienter.

- **Ro i sinnet**

Fem års garanti på alle våre lupebriller, kombinert med utmerket service og support fra våre forhandlere.

- **Langt og sunt arbeidsliv**

Dine skreddersydde lupebriller sikrer god ergonomisk arbeidsstilling, som forebygger muskel- og skjelettplager.

- **Design og funksjonalitet**

Fem ganger vinner av den internasjonale produktdesignprisen Red Dot Design Award.

- **Tilpasset løsning**

Våre spesialister innen optikk og ergonomi sørger for en løsning som er skreddersydd til deg.

Ta kontakt med din lokale ExamVision forhandler for ytterligere informasjon og veiledning.



Spesialtilpassede lupebriller

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupebriller er fremstilt av de fineste kvalitetskomponenter, håndlaget etter dine behov.

Nøkkelfunksjoner

- Førsteklasses dansk design.
- Justerbar og lett ramme i høykvalitets titan eller karbon.
- Optikk i verdensklasse med den beste antireflekterende og beskyttende overflatebehandling.
- Akromatiske linser forhindrer fargespredning (regnbueeffekt).
- Mulighet for en lupevinkel på opp til 40° for en forbedret arbeidsstilling.
- Brukerdefinert og etterjusterbar arbeidsavstand på opp til 60 cm.
- Fremragende dybdeskarpheit.
- Kompatibel med et utvalg av lys.



Syn og linser

ExamVision er spesialister innen optikk og optiske løsninger. Vi er stolte av å tilby de mest tilpasningsvennlige lupebrillene på markedet, satt sammen av de aller beste komponenter og overflatebehandlinger.

Optikk i verdensklasse

- Mulighet for individuell syns-korreksjon i både brilleglass og okular gir den beste optiske løsningen for dine øyne.
- Tilpassede brilleglass: vi tilbyr monfokale eller multifokale (progressive) glass.
- Hi-Index glass (lettere, tynnere og mer robuste).
- Ergonomiske prismar: Prisma Lens System (se s 11)
- BlueLight Protection - tilgjengelig i både brilleglass og okular (se s 9).
- Vision+Lens Protection (VLP) beskytter mot skadelig UV-lys, og reduserer refleksjoner og riper.
- Designet for å imøtekomme alle typer synskorreksjon og eventuelle fremtidige endringer i synet.

ExamVision lupesystemer



reddot design award
winner 2010

Galilean HD

- Perfekt avbalansert med god komfort.
- Maksimal dybdeskarpheit og bredt synsfelt.
- Ideell for heldagsbruk.
- Okular og innfatning i titan.
- Alle typer synskorreksjon er mulig.
- Valgfritt: ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

2.3

2.8

3.3

3.8



reddot award 2014
winner

Kepler Kompakt

- Lett og ultrakompakt design.
- Høye forstørrelser til mer krevende prosedyrer.
- Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant.
- PowerUp system - mulighet for å endre forstørrelse ved en senere anledning.
- Låsbar finjustering av fokus.
- God dybdeskarpheit gir stor bevegelsesfrihet
- Valgfritt: ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

3.5

4.6

5.7

Essential

- En super lupebrille for studenter eller andre nybegynnere.
- God forstørrelse til en fornuftig pris.
- Galilean linsesystem med okularer i aluminium.
- Passer i alle ExamVision innfatninger.

Individuelle forstørrelser

2.5 3.0



Kepler Advanced

- Eneste lupebrille med 4 forstørrelser i en og samme lupe.
- Bytt forstørrelse enkelt med *Turn'N'Click* systemet.
- Perfekt forstørrelse til alle dine krevende behandlinger.
- Lett og behagelig ved bruk hele dagen. 20 gram lettere enn andre sammenlignbare lupebriller.
- Uovertruffen skarphet fra lav til høy forstørrelse.
- Laget av titan og karbonkompositt.
- Valgfritt: ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

4 forstørrelser i 1 lupe

3.6 4.5 5.5 6.4



reddot design award
winner 2019



Total LED-lys

Utviklet og produsert i Danmark, som supplement til ExamVision lupebriller. Total LED-lys er designet for å gi rett mengde lys akkurat der du trenger det.



Nøkkelfunksjoner

- Tre lysintensiteter.
- Minst 6 timers batteritid ved høyeste lysintensitet.
- Oppladbart og utskiftbart batteri.
- To valgfrie fargetemperaturer: *Intense og Pure.*
- Fokuset, ensartet belysning i hele synsfeltet - ingen skyggepartier.
- Festes enkelt på brilleinnfatningen.



Tilbehør

ExamVision tilbyr et bredt utvalg av tilbehør som komplementerer dine lupebriller.

Dette omfatter alt fra funksjonelt og essensielt utstyr som f.eks rensespray, wiper og sprutbeskyttelse, til mer estetisk tilbehør som personlige farger eller stener på innfatningen.

Sjekk ut examvision.com for å se hva som finnes, og se hvordan du kan gjøre lupebrillen din mer personlig.





Ergonomi

God ergonomi er en forutsetning for et langt og godt arbeidsliv.

Ergonomi og sikkerhet

Ved å bruke lupebriller, vil du ikke bare oppnå en optimal ergonomisk arbeidsstilling, men også øke avstanden mellom deg og pasienten. Slik kan du opptre profesjonelt, uten at det går på bekostning av egen helse eller sikkerhet.

Få kvalifisert ergonomisk rådgivning

Forhandlere av ExamVision lupebriller kan gi kvalifisert rådgivning om god ergonomi. Få tips om hvordan du kan arbeide på en måte som fremmer fysisk velvære og god kroppsholdning.

Gjør regelmessige tøyøvelser

Lange perioder med en statisk kroppsholdning kan forårsake smerter i rygg og nakke. Regelmessige pauser og tøyøvelser er anbefalt og tar kun et øyeblikk. Det er dessuten bevist at regelmessige pauser bidrar til større fokus og produktivitet.

Viktige faktorer for god ergonomi

Lupevinkel og arbeidsavstand

Når du velger et par lupebriller fra ExamVision, vil lupevinkel og arbeidsavstand alltid bli målt og individuelt tilpasset dine behov. Slik oppnår du best mulig ergonomisk arbeidsstilling.

Prisma Lens System™


Ved å lege inn ergonomiske prizmer i lupene, vil det du ser på virke høyere enn det egentlig er. Dermed kan du sitte mer oppreist og få en bedre arbeidsstilling. Prisma Lens System er valgfritt.

Riktig innfatning

Du vil få veiledning og hjelp til å velge en innfatning som passer til din ansiktsfasong og pupilleavstand. Dette sørger for at lupebrillen sitter komfortabelt og korrekt.

— Med Prisma Lens System
— Med lupebriller
— Uten lupebriller



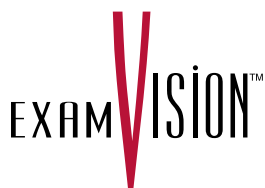

 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

www.examvision.com

Din lokale forhandler:

Ortomedic AS

Vollsveien 13 E, 1326 Lysaker

Tel: 67518600

ortomedic@ortomedic.no

www.ortomedic.no